

explorē 5

User Guide



Humanware™

see things. differently.

Manuale Utente

explorē 5

PRIMA DI INIZIARE AD UTILIZZARE EXPLORÈ 5

1. Collegate all'alimentatore il cavo USB per la ricarica.
2. Posizionate explorè 5 in modo tale che lo schermo sia di fronte a voi. Collegate con attenzione il cavo alla presa per la ricarica, che si trova sulla parte sinistra del dispositivo, verificando che il simbolo in rilievo sul connettore USB sia rivolto verso il basso. Quindi collegate l'alimentatore ad una presa di corrente.

IMPORTANTE: fate attenzione quando inserite il cavo nella porta per la ricarica.

3. Lasciate il dispositivo collegato fino a che la batteria sia completamente carica. Durante la ricarica il dispositivo diventa più caldo, ma è normale.
4. Quando il dispositivo è completamente carico, scollegate delicatamente il cavo di alimentazione.
5. Premete il **Pulsante di accensione** per iniziare ad usare il dispositivo.

SOMMARIO

PRIMA DI INIZIARE AD UTILIZZARE explorē 5.....	3
Capitolo 1 – PANORAMICA DEL PRODOTTO	3
INTRODUZIONE	3
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	3
DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO	4
Capitolo 2 – UTILIZZARE explorē 5.....	5
SPEGNERE explorē 5	5
Modalità INGRANDIMENTO	6
AUMENTARE/DIMINUIRE L'INGRANDIMENTO	6
MODIFICARE IL CONTRASTO	6
RIGHE E FINESTRE	6
AUTOFOCUS	7
CATTURARE UN'IMMAGINE	7
INGRANDIRE E DIMINUIRE LE IMMAGINI ACQUISITE.....	7
Modalità GALLERIA	8
ACQUISIRE E SALVARE LE IMMAGINI IN GALLERIA.....	8
VISUALIZZARE LE IMMAGINI IN GALLERIA	8
CANCELLARE LE IMMAGINI DALLA GALLERIA.....	8
USARE UNO SCHERMO ESTERNO.....	8
Capitolo 3 – ESPORTARE LE IMMAGINI SU COMPUTER	9
Capitolo 4 – CONFIGURARE explorē 5.....	10
ACCEDERE, SPOSTARSI E CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI.....	10
VISUALIZZARE LE VERSIONI SOFTWARE E HARDWARE.....	11
RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE	11

Capitolo 5 – AGGIORNARE explorē 5	12
Capitolo 6 – RICARICARE explorē 5	12
Capitolo 7 – RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	14
explorē 5 NON SI ACCENDE	14
LO SCHERMO E' NERO	14
explorē 5 SI SPEGNE DOPO UN PERIODO DI INATTIVITA'	14
I COLORI SONO DIFFICILI DA INDIVIDUARE	14
CI SONO MOLTI RIFLESSI	14
explorē 5 NON RISPONDE	15
ALTRI PROBLEMI	15
Capitolo 8 – PULIRE explorē 5	16
PULIRE LO SCHERMO LCD	16
PULIRE LA PARTE ESTERNA DI explorē 5	16
Appendice A – ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	17
Appendice B – CARATTERISTICHE TECNICHE	18
Appendice C – ASSISTENZA	18
Appendice D – NORMATIVE FCC	19
Appendice E – GARANZIA	20

CAPITOLO 1 – PANORAMICA DEL PRODOTTO

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato HumanWare explorē 5, il più piccolo videoingranditore portatile con schermo da 5”.

Poichè siamo noi stessi utenti dei nostri prodotti, in HumanWare sappiamo che, oltre alla miglior qualità dell’immagine, un buon videoingranditore deve essere portatile, comodo, facile da usare e deve sempre essere pronto all’uso quando serve, dove serve. Explorē 5 è stato progettato seguendo questi concetti.

Leggete attentamente le istruzioni operative e sulla sicurezza che trovate in questa guida utente prima di usare il dispositivo. Se avete delle domande sul dispositivo, contattate l’Assistenza Clienti di HumanWare. I riferimenti per l’Assistenza si trovano sul retro di questo Manuale.

Congratulazioni per il vostro acquisto. Leggerete le pagine di questa guida in poco tempo.

Copyright 2019 di Technologies HumanWare Inc., tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o distribuita in nessuna forma, o memorizzata su database o sistemi di recupero, senza autorizzazione scritta da parte di Technologies HumanWare Inc.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Confezione	Videoingranditore explorē 5 Custodia Alimentatore Cavo USB Cordino Manuale Panno in microfibra per la pulizia Cavo per l’uscita video in HDMI
-------------------	--

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Parte frontale


1. Pulsante Contrasto

2. Pulsante Zoom+

3. Pulsante Zoom-

4. Pulsante Blocca

5. Anello

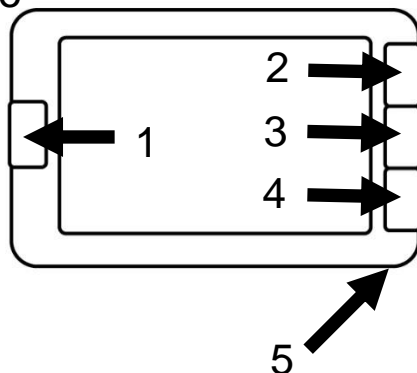


Parte posteriore

1. Pulsante accensione

2. Telecamera


3. LED

4. Impugnatura

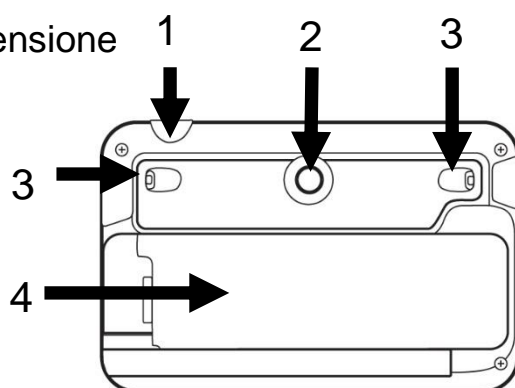


Lato Sinistro

1. Porta USB
(per ricarica)

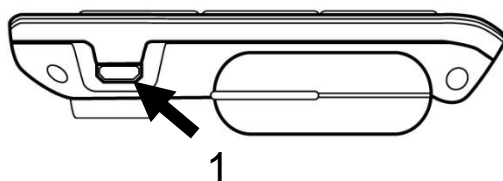


Lato destro

1. Porta HDMI
(per monitor esterno)

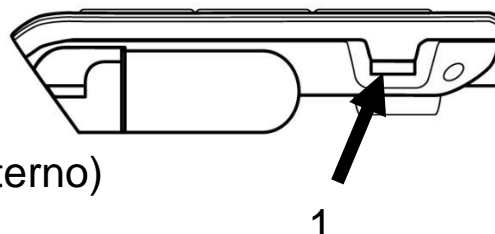


CAPITOLO 2 – UTILIZZARE EXPLORÈ 5


Per accendere il vostro dispositivo, premete il **Pulsante di accensione** sul bordo superiore a destra. Potete tenerlo come un tablet, come indicato nella figura.

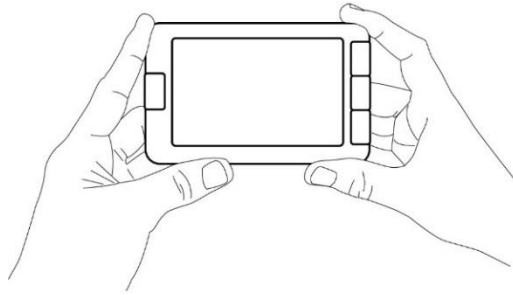

In alternativa, potete accenderlo semplicemente aprendo l'impugnatura, proprio come terrestre una lente d'ingrandimento.

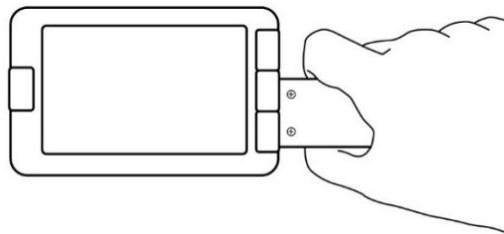

Il dispositivo può essere usato senza utilizzare le mani, aprendo l'impugnatura e posizionandolo sul testo da leggere (vedi figura che segue).

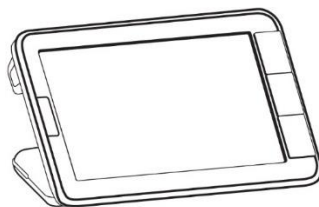

Dopo pochi secondi, lo schermo di explorè 5 visualizzerà l'immagine proveniente dalla telecamera (Modalità Ingrandimento).

SPEGNERE EXPLORÈ 5

Per spegnere il dispositivo, premere il **Pulsante di accensione**. Oppure, se l'impugnatura fosse aperta, potete spegnerlo semplicemente riposizionandola nella posizione di chiusura.

MODALITÀ INGRANDIMENTO

La Modalità Ingrandimento è la modalità principale di explorē 5. Mantenete il dispositivo sopra il testo o l'oggetto che desiderate ingrandire e iniziate a leggere.

AUMENTARE/DIMINUIRE L'INGRANDIMENTO

Per ingrandire, premete o tenete premuto il pulsante **Zoom+** fino a che l'immagine raggiunge la dimensione desiderata. Allo stesso modo, è possibile diminuire l'ingrandimento premendo o tenendo premuto il pulsante **Zoom-** fino a raggiungere la dimensione desiderata.

MODIFICARE IL CONTRASTO

Explorē 5 vi permette di personalizzare il contrasto per meglio rispondere alle vostre esigenze. Premete il **Pulsante Contrasto** per scorrere le varie possibilità, fino a quando trovate quello adatto a voi.

Le Modalità Contrasto disponibili sono:

Colori reali, Nero su Bianco, Bianco su Nero, Nero su Giallo, Giallo su Nero

Ci sono anche altre modalità disponibili:

- Nero su Arancione, Arancione su Nero, Nero su Ciano, Ciano su Nero, Nero su Viola, Viola su Nero, Nero su Verde, Verde su Nero, Blu su Giallo, Giallo su blu, Bianco su blu, Blu su Bianco.

È possibile selezionare la Modalità Contrasto preferita nel menu Impostazioni.

RIGHE E FINESTRE

Con explorē 5, è possibile aggiungere una riga orizzontale o nascondere parte dell'immagine per facilitare la lettura.

Per aggiungere o rimuovere una riga, premete e tenete premuti i pulsanti **Contrasto** e **Zoom+** simultaneamente.

Per aggiungere o rimuovere le finestre, premete e tenete premuti i pulsanti **Contrasto** e **Zoom-**.

AUTOFOCUS

Explorē 5 è dotato di autofocus che può essere impostato su **Bloccato** o **Sbloccato** dal menu. Quando l'autofocus è impostato su **Sbloccato** (default), explorē 5 regolerà automaticamente la messa a fuoco.

Quando l'autofocus è impostato su Bloccato e il dispositivo viene usato su una superficie piana, explorē 5 manterrà la sua messa a fuoco indipendentemente da qualsiasi spostamento.

Quando l'autofocus è impostato come Bloccato, e l'ingranditore viene tenuto come se fosse un tablet o con l'impugnatura, explorē 5 manterrà la messa a fuoco per circa 6 cm di distanza.

Nota: per ripristinare la messa a fuoco quando l'autofocus è impostato come Bloccato, premete il **Pulsante Foto** una volta per catturare l'immagine, quindi premete nuovamente il **Pulsante Foto** per tornare alla Modalità Ingrandimento.

Nota: l'Autofocus è impostato come Bloccato di default in Modalità Stativo.

CATTURARE UN'IMMAGINE

explorē 5 consente di acquisire un'immagine in Modalità Ingrandimento per facilitarne la lettura, una funzione particolarmente utile quando si leggono le etichette dei prodotti che sono sugli scaffali nei negozi. Per catturare un'immagine, premete il **Pulsante Foto** con il videoingranditore rivolto verso l'oggetto da leggere. In questo modo si acquisirà l'immagine di quello su cui sta puntando il dispositivo. L'immagine sarà visualizzata sullo schermo fino a quando si deciderà di passare alla Modalità Ingrandimento.

Per ritornare alla Modalità Ingrandimento, premete il **Pulsante Foto** ancora una volta.

INGRANDIRE E DIMINUIRE LE IMMAGINI ACQUISITE

Per ingrandire le immagini acquisite, premete o tenete premuto il pulsante **Zoom+** fino a raggiungere la dimensione desiderata. Allo stesso modo, è possibile diminuire l'ingrandimento delle immagini acquisite premendo e tenendo premuto il pulsante **Zoom-** fino ad ottenere la dimensione dell'immagine desiderata.

MODALITÀ GALLERIA

ACQUISIRE E SALVARE LE IMMAGINI IN GALLERIA

Per salvare un'immagine nella Galleria, premete e tenete premuto il **Pulsante Foto** per mezzo secondo mentre siete in Modalità Ingrandimento. Sullo schermo apparirà per qualche istante “Salvataggio” ad indicare che l'immagine è stata salvata nella Galleria di explorē 5.

VISUALIZZARE LE IMMAGINI IN GALLERIA

Potete accedere alla Galleria di explorē 5 usando il menu. In alternativa, potete accedere alla Galleria premendo e tenendo premuti i pulsanti **Foto** e **Contrasto** mentre siete in Modalità Ingrandimento.

Potete navigare nella Galleria premendo i pulsanti **Zoom+** e **Zoom-**.

Per uscire dalla Galleria, premete il **Pulsante Contrasto**.

CANCELLARE LE IMMAGINI DALLA GALLERIA

Per cancellare un'immagine dalla Galleria, entrate nella Galleria premendo e tenendo premuti simultaneamente i pulsanti **Foto** e **Contrasto** in Modalità Ingrandimento.

Individuate l'immagine che desiderate cancellare (premendo i pulsanti **Zoom+** and **Zoom-**), quindi premete e tenete premuto il **Pulsante Foto** per cancellare l'immagine. Per confermare la cancellazione della immagine, selezionate “Eliminare” premendo il pulsante **Zoom+**.

Se desiderate cancellare tutte le immagini, potete farlo entrando nel menu e selezionando Elimina Galleria.

USARE UNO SCHERMO ESTERNO

Per avere un'immagine più grande, è possibile visualizzare il contenuto di explorē 5 su uno schermo esterno (per esempio la TV). Per farlo, collegate explorē 5 ad uno schermo esterno tramite cavo HDMI. Consultate l'appendice B per l'elenco dei formati video supportati in uscita.

Nota: sarà necessario riavviare explorē 5 dopo aver scollegato il cavo HDMI.

CAPITOLO 3 – ESPORTARE LE IMMAGINI SU COMPUTER

Per esportare le immagini salvate in Galleria sul vostro computer, collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB in dotazione. Sul dispositivo dovrebbe apparire il messaggio “PC collegato”. Ora è possibile copiare e incollare le immagini dalla Galleria sul computer usando Esplora file sul computer.

Quando explorē 5 è collegato a un personal computer, si comporta esattamente come una chiavetta USB o un drive esterno. Le immagini della Galleria si trovano nella cartella Immagini del vostro explorē 5.

Quando state copiando o cancellando immagini dal dispositivo, non scollegate mai il cavo USB, perchè alcune immagini potrebbero essere perse.

CAPITOLO 4 – CONFIGURARE EXPLORÈ 5

ACCEDERE, SPOSTARSI E CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI

Premete e tenete premuto il **Pulsante Contrasto** per entrare nel menu. Potete spostarvi nel menu premendo il pulsante Zoom+ per scorrere verso l'alto e il pulsante Zoom- per scorrere verso il basso.

Per selezionare un elemento, premete il **Pulsante Blocca**. Per tornare al menu precedente, premete **Contrasto** o premete e tenete premuto **Contrasto** per ritornare alla Modalità Ingrandimento.

Il menu contiene i seguenti elementi:

- **Galleria** (per accedere alle immagini della Galleria)
- **Autofocus**: Sbloccato*, Bloccato (Bloccato* in Modalità Stativo)
- **Luminosità dello schermo** (cambia il livello di luminosità dello schermo): da 1 a 9 (8*)
- **Auto-spegnimento** (imposta per quanto tempo resta acceso il dispositivo senza usarlo): 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti*, 10 minuti
- **Zoom preferito** (cambia l'ingrandimento predefinito quando aprite il dispositivo): Precedente (l'ingrandimento che avevate quando avete chiuso il dispositivo), da 2x* a 22x
- **Contrasto (sottomenu)**
 - **Contrasto Preferito** (selezionate il contrasto con il quale si avvierà explorè 5): Precedente* (ultimo contrasto utilizzato), Colore, Contrasti abilitati
 - **Menu** (modifica colori menu): Nero su Bianco, Bianco su Nero, Nero su Giallo, Giallo su Nero, Nero su Arancione, Arancione su Nero, Nero su Ciano, Ciano su Nero, Nero su Viola, Viola su Nero, Nero su Verde, Verde su Nero, Blu su Giallo, Giallo su Blu, Bianco su Blu, Blu su Bianco

- **Contrasto attivato** (seleziona le coppie di colore per la Modalità Ingrandimento): Nero su Bianco, Bianco su Nero, Nero su Giallo, Giallo su Nero, Nero su Arancione, Arancione su Nero, Nero su Ciano, Ciano su Nero, Nero su Viola, Viola su Nero, Nero su Verde, Verde su Nero, Blu su Giallo, Giallo su blu, Bianco su blu, Blu su Bianco
- **Luci:** Acceso*, Basso, Spento
- **Lingua:** Inglese (US)*, Inglese (UK), Francese, Spagnolo, Tedesco, Olandese, Danese, Polacco, Portoghese (Portogallo), Portoghese (Brasile), Norvegese (Bokmål), Italiano, Svedese, Finlandese, Russo, Ceco, Giapponese, Coreano, Islandese, Estone, Turco, Lituano, Ungherese, Lettone, Arabo, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Ebraico, Georgiano, Farsi, Kurdo
- **Schermo:** 50Hz , 60Hz*
- **Elimina Galleria**
- **Impostazioni predefinite**
- **Informazioni su** (visualizza/imposta le informazioni sul dispositivo): Data e ora, Software, Hardware, Numero di serie.

VISUALIZZARE LE VERSIONI SOFTWARE E HARDWARE

Per vedere le versioni software e hardware di explorē 5, entrate nel menu premendo e tenendo premuto il **Pulsante Contrasto**.

Scorrete verso il basso premendo **Zoom-** fino a raggiungere “Informazioni su” e quindi premete il **Pulsante Foto** per visualizzare le versioni correnti del software e dell’hardware di explorē 5.

RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, entrate nel menu premendo e tenendo premuto il **Pulsante Contrasto**. Scorrere verso il basso fino a raggiungere “Impostazioni predefinite” premendo **Zoom-** quindi premete il **Pulsante Blocca**. Selezionate Sì e premete nuovamente **Foto** per confermare.

CAPITOLO 5 – AGGIORNARE EXPLORĒ 5

Collegatevi alla pagina:

<http://www.humanware.com/support/explore5> e scaricate l'ultima versione del software per explorē 5. Collegate il dispositivo al computer usando il cavo USB in dotazione. Tramite Esplora file sul computer, incollate il file scaricato direttamente nella cartella principale di explorē 5. Una volta completato il trasferimento, scollegate il cavo USB dal computer. Avviate explorē 5. Il dispositivo si dovrebbe aggiornare automaticamente.

CAPITOLO 6 – RICARICARE EXPLORĒ 5

IMPORTANTE: La batteria si scalda durante la ricarica, ma questo è normale. Non ricaricare la batteria vicino ad una fonte di calore.

Per ricaricare la batteria tramite presa di corrente:

- Collegate il cavo di ricarica USB all'alimentatore di explorē 5. Poi collegate il cavo di ricarica USB al dispositivo e l'alimentatore ad una presa di corrente.
- Lasciate il dispositivo collegato fino a quando la batteria è completamente carica. Quando completamente scarico dovrebbe impiegare circa 3,5 ore per ricaricarsi.

Per ricaricare la batteria con un computer:

- Collegate il cavo di ricarica USB all'alimentatore del videoingranditore.

Durante la procedura di ricarica, apparirà per qualche istante l'immagine qui sotto, ma anche quando accendete il dispositivo.



Questa icona indica che il dispositivo è in carica. Il numero rappresenta la percentuale di ricarica.

A causa del basso voltaggio, la ricarica dalla porta USB del PC potrebbe essere più lenta. In alcuni casi, il videoingranditore potrebbe non essere in grado di ricaricarsi in base alla quantità di energia fornita dal computer. Il modo più

efficace per ricaricare il dispositivo consiste nell'usare il cavo USB in dotazione, collegato all'alimentatore.

Anche se potrebbe allungare i tempi di ricarica, il dispositivo può essere usato anche quando è collegato alla corrente.

Tenete presente che, se la batteria è completamente scarica o se il dispositivo non viene usato da molto tempo, potrebbe esserci un ritardo di qualche minuto prima che mostri una qualsiasi attività.

Notate anche che, come per tutti i dispositivi elettronici, explorē 5 si scalderà durante l'uso o quando è in carica. Sebbene ciò non comporti dei rischi, raccomandiamo di evitare un contatto prolungato con la superficie grigia sulla parte posteriore, che funziona come dissipatore di calore.

Precauzioni di sicurezza per la batteria:

- Non disassemblate o modificate la batteria.
- Usate solo l'alimentatore fornito da HumanWare.
- Potrebbe verificarsi un rischio di surriscaldamento, incendio o esplosione se la batteria venisse a contatto con il fuoco, se fosse riscaldata, se fosse soggetta a urti, se fosse messa a contatto con l'acqua o se i suoi terminali andassero in corto circuito.

CAPITOLO 7 – RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

EXPLORE 5 NON SI ACCENDE

Premete e tenete premuto il **Pulsante di accensione**. Se il dispositivo non si accende ancora, potrebbe essere necessario ricaricare la batteria.

Collegate il cavo USB in dotazione con l'alimentatore ad una presa di corrente o il solo cavo USB alla porta USB di un computer acceso. Se la batteria fosse completamente scarica, potrebbe essere necessario qualche minuto, prima che il dispositivo mostri segni di attività.

Si veda il **Capitolo 6** per ulteriori dettagli.

LO SCHERMO E' NERO

Se l'unità si trova su un tavolo o su qualsiasi superficie piana, l'immagine potrebbe non essere visibile. Sollevate l'ingranditore per vedere se questo è il motivo per cui lo schermo è nero.

Se questo non risolvesse il problema, provate a riavviare il dispositivo.

EXPLORE 5 SI SPEGNE DOPO UN PERIODO DI INATTIVITA'

Questo è il comportamento normale per preservare la batteria. Di default, explore 5 si spegnerà dopo 5 minuti di inattività. È possibile configurare dal menu il tempo di spegnimento automatico predefinito tra 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti o 10 minuti.

I COLORI SONO DIFFICILI DA INDIVIDUARE

Come prima cosa assicuratevi che ci sia luce a sufficienza intorno a voi.

Scegliete una diversa combinazione di colori premendo il **Pulsante Contrasto** mentre siete in Modalità Ingrandimento.

CI SONO MOLTI RIFLESSI

Spostate l'oggetto che state osservando in un'altra posizione per ridurre il riflesso.

EXPLORĒ 5 NON RISPONDE

Accertatevi che explorĒ 5 non sia collegato all'alimentazione con il cavo USB; se lo fosse, scollegatelo. Premete il pulsante di accensione per 10 secondi. Il sistema si spegnerà. Quindi, premete il pulsante di accensione per un secondo per riaccendere explorĒ 5.

ALTRI PROBLEMI

Ripristinare le impostazioni predefinite dal menu. Entrate nel menu premendo e tenendo premuto il Pulsante **Contrasto**. Scorrete verso il basso premendo **Zoom-** fino a raggiungere "Impostazioni predefinite", quindi premete **Foto** per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Selezionate Sì e premete nuovamente **Foto** per confermare.

CAPITOLO 8 – PULIRE EXPLORĒ 5

PULIRE LO SCHERMO LCD

Assicuratevi che il dispositivo sia spento e scollegato dalla corrente.

Assicuratevi di usare solo panni in microfibra come quello in dotazione con explorē 5. Passate delicatamente il panno sullo schermo LCD.

Se decidete di pulire lo schermo LCD con un detergente liquido, assicuratevi che il detergente sia adatto a pulire gli schermi LCD. L'acqua distillata, l'alcool isopropilico e soluzioni miste acqua-aceto (con non più del 10% di aceto) rientrano tra le soluzioni liquide adatte agli schermi LCD.

Usate solo una quantità minima di liquido per evitare infiltrazioni all'interno del dispositivo, che potrebbero danneggiarlo. Assicuratevi che sullo schermo non rimangano tracce di liquidi. Ripetete i passaggi precedenti per le macchie più difficili da rimuovere.

Non usate MAI detergenti per la casa per pulire explorē 5.

Non spruzzate MAI direttamente liquidi sullo schermo LCD.

Non usate MAI prodotti per la pulizia che contengano alcool etilico, acido etilico, ammoniacca, acetone o cloruro di metile.

Non usate MAI tovaglioli di carta per pulire lo schermo LCD.

PULIRE LA PARTE ESTERNA DI EXPLORĒ 5

Assicuratevi che il dispositivo sia spento e scollegato dalla corrente.

Se necessario, usate un panno leggermente umido per pulire la parte esterna del dispositivo.

Assicuratevi che non rimanga nessun liquido sul dispositivo. Ripetete i passaggi precedenti per le macchie più difficili da rimuovere.

Non usate MAI materiale abrasivo, spray, alcool o solventi per pulire la parte esterna di explorē 5.

APPENDICE A – ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Non guardate mai direttamente le luci a LED sul lato posteriore dell'ingranditore. Tenete il dispositivo lontano da acqua o fonti di umidità. Non immergete l'apparecchio nell'acqua.

Spegnete sempre explorē 5 prima di pulirlo.

Usate solo i cavi in dotazione.

Batteria:

explorē 5 ha una batteria interna ricaricabile agli ioni di litio e deve essere sostituita da un tecnico autorizzato da HumanWare.

- Non usate/lasciate il dispositivo vicino a fonti di calore e esposto ad alte temperature.
- Usate solo alimentatori USB compatibili per caricare la batteria.
- Non disassemblate o modificate l'unità.
- Non immergete l'unità in acqua, evitate che si bagni.
- Evitate che l'unità subisca urti.
- Non usate oggetti appuntiti o oggetti che possano danneggiare l'unità.
- Se la batteria perde liquido e quest'ultimo viene a contatto con gli occhi, non sfregateli. Bagnateli con acqua corrente ed eventualmente consultate un medico.
- Se la batteria perde liquido e quest'ultimo viene a contatto con la pelle, lavate immediatamente con acqua corrente la parte che è stata a contatto con il liquido per prevenire infortuni.

APPENDICE B – CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 89 x 139.4 x 21.3 mm

Display: LCD da 5" WVGA (800 x 480)

Ingrandimento: da 2x a 22x

Autofocus

Peso: 228 g

Alimentazione in entrata: Connettore Micro USB, 5V. Max 1.5A

Durata Batteria: 3 ore

Tempo di ricarica: 3.5 ore (con il dispositivo spento), 4.75 ore (con il dispositivo acceso)

Compatibilità video in uscita:

Risoluzioni video supportate:

1280x720p 60Hz, 50Hz

1920x1080p 60Hz, 50 Hz, 24Hz

1920x1080i 60Hz, 50Hz

Nessun supporto in emulazione in DVI.

Condizioni di utilizzo:

Temperatura: da 10 °C a 40 °C

Umidità: da 20% a 80%

Trasporto e stoccaggio:

Temperatura: da -20 °C a 60 °C

Umidità: da 10% a 95%

APPENDICE C – ASSISTENZA

Per l'assistenza, contattate gli uffici di HumanWare più vicini a voi.

Italia: Subvision S.r.l. (0039) 02 799 341

assistenza@subvisionmilano.com

Internazionale: support@humanware.com

Europa: (0044) 1933 415 800

eu.support@humanware.com

APPENDICE D – NORMATIVE FCC

Dichiarazione FCC:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. L'uso è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non causa interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possano causare delle operazioni indesiderate.

Avviso FCC:

Modifiche non autorizzate al sistema possono invalidare la capacità di usare questo dispositivo da parte dell'utente.

Nota: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato soddisfare le limitazioni per i dispositivi digitali di Classe B, che seguono la Parte 15 delle normative FCC. Queste limitazioni sono state pensate per dare una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato come da istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in un'installazione. Se il prodotto provoca danni alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata dall'accensione o dallo spegnimento del dispositivo, l'utente può provare a correggere l'interferenza seguendo una di queste indicazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di un circuito diverso rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV per avere aiuto.

Nota: questa unità è stata testata con cavi schermati. Per assicurare piena compatibilità, con questo dispositivo dovranno essere usati cavi schermati.

APPENDICE E – GARANZIA

HumanWare garantisce che explorē 5, a partire dalla data di acquisto, è esente da qualsiasi difetto materiale e di manodopera per 2 anni, salvo indicazioni diverse previste dalle leggi in vigore nel paese in cui è stato acquistato.

Questa garanzia non è trasferibile e si applica a tutti i casi dove il danno non è causato da uso improprio, maltrattamento o negligenza. Per uso improprio si intende un uso del prodotto diverso da quello descritto in questo manuale. In nessun caso HumanWare o i suoi distributori saranno ritenuti responsabili per danni indiretti o conseguenti.

Non sarà effettuata nessuna riparazione o sostituzione in garanzia in mancanza di copia della ricevuta d'acquisto originale, che chiediamo di conservare. Se il sistema dovesse essere rispedito, usate la confezione originale.

Customer support

For customer support, please contact the HumanWare office nearest you or visit our Website at: www.humanware.com

Global: support@humanware.com

North America: 1 (800) 722-3393
us.support@humanware.com

Europe: (0044) 1933 415 800
eu.support@humanware.com

Australia / Asia: (02) 9686 2600
au.sales@humanware.com

Humanware™
see things. differently.

Assistenza per l'Italia: Subvision S.r.l.

tel. (+39) 02 799341

assistenza@subvisionmilano.com

ACCD-0137
REV 11